


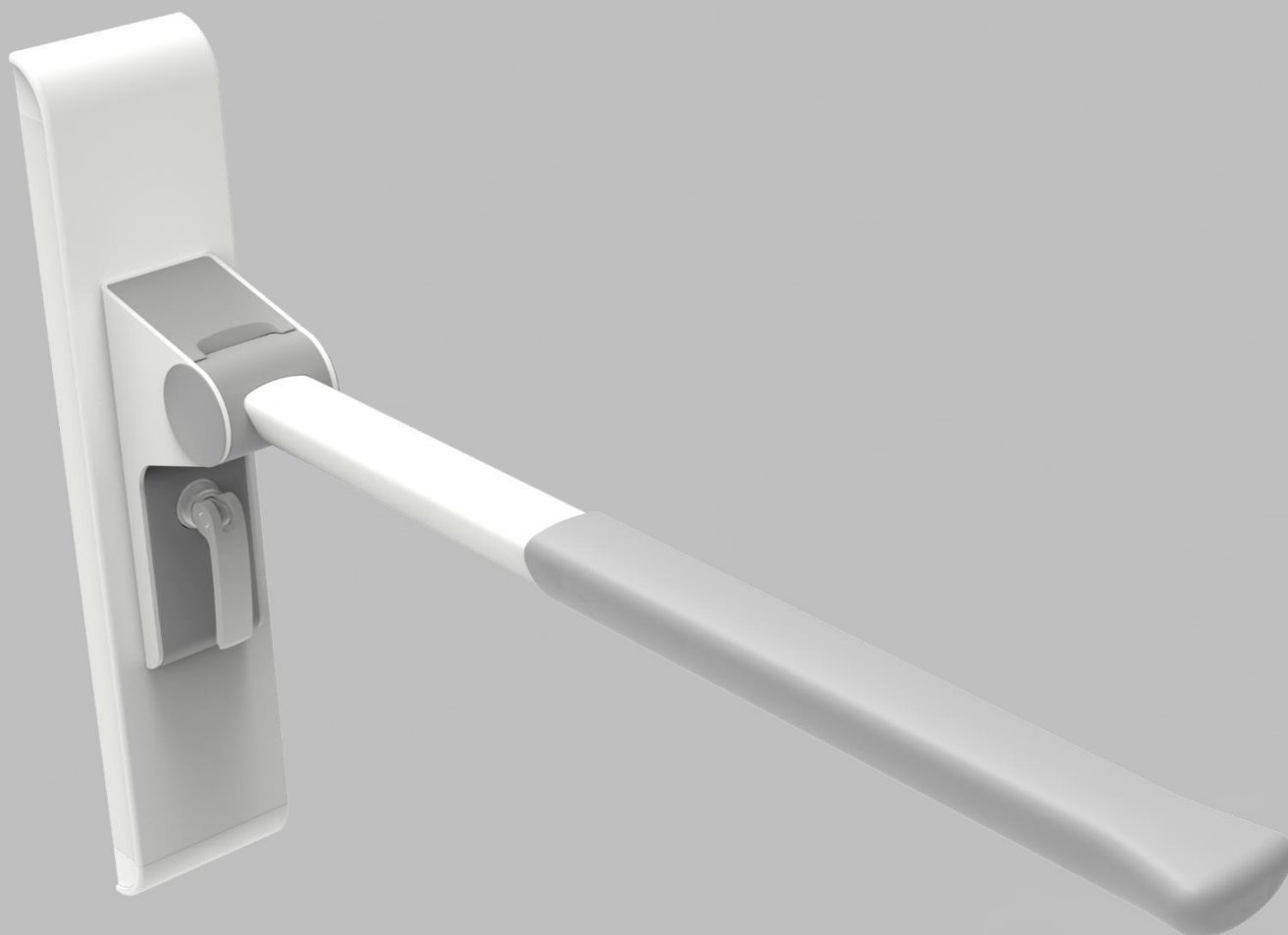

Høydejusterbar enhet til Ropox Toalettstøtter

Bruksanvisning

Dette heftet skal alltid oppbevares sammen med produktet.

Innhold

1. Symbolforklaring	3
2. Sikkerhet	3
2.1 Produktmerking	5
3. Generelle krav	6
3.1 Produktinformasjon	6
3.2 Produktbeskrivelse	7
3.3 Bruksformål	7
3.4 Egnet operatør	7
3.5 Produktets dimensjoner	7
4. Instruksjoner for bruk	8
4.1 Monteringsgrensesnitt	8
4.2 Installasjon av produktet	9
4.3 Montering av toalettstøtte	11
4.4 Betjening av produktet – hurtigutløser	13
4.5 Betjening av produktet – uten hurtigutløser	14
5. Rengjøring	15
5.1 Forhåndsgodkjente desinfeksjonsmidler	15
6. Vedlikehold	15
7. Miljøhensyn	16
8. Rapportering av ulykker/uhell	16

1. Symbolforklaring

Advarsel Indikasjon på en potensielt farlig situasjon. Hvis den ikke unngås, kan det resultere i alvorlig kroppsskade eller død.	
Forsiktig Indikasjon på en potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre eller moderat kroppsskade. Symbolet brukes også til å advare om feilaktig bruk.	
Viktig Dette symbolet gjør oppmerksom på korrekt bruk og håndtering av produktet.	

2. Sikkerhet

	Denne bruksanvisningen skal leses og forstås før bruk. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten av produktet. Bruk, installasjon og service av dette produktet skal utføres i overensstemmelse med denne bruksanvisningen for å unngå farlige situasjoner som kan føre til personskade. Bruk aldri produktet på annen måte enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ethvert avvik fra dette kan resultere i personskade, farlige situasjoner og/eller gjøre skade på produktet. Personen som installerer og bruker dette produktet, enten som operatør eller pasient, skal ha tilgang til nødvendig sikkerhetsinformasjon i denne bruksanvisningen.
---	---

	Ikke utfør reparasjoner, demontering eller montering, egne tilføyelser, justeringer eller endring av produktet utover det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Disse skal utføres av Ropox-autorisert personell. Ikke utfør service når produktet er i bruk med en pasient. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Ikke la barn få leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Hvis produktet har feil eller skader, skal det ikke brukes før det har blitt reparert eller byttet ut.
	Informasjonen i denne bruksanvisningen er basert på korrekt installasjon i overensstemmelse med installasjonsveiledningen til produktet. Ropox kan ikke holdes ansvarlig hvis produktet brukes på en måte som avviker fra det som er angitt i denne bruksanvisningen og/eller i installasjonsveiledningen. Ropox forbeholder seg rett til å endre denne bruksanvisningen og referansedokumenter uten forutgående varsel.

2.1 Produktmerking

Ringstedgade 221, DK 4700 Næstved
ROPOX™ +45 55750500
 Info@ropox.dk
 Ropox Height Adjustment for Toilet Support Arms
 Wall mounted, 20 cm stroke, quick release

ITEM NO: 40-40450-1
 MAX LOAD: 250 kg
 Serial No: N10-xxxx
 01-01-25

UK CA CE

ROPOX™ WEB.: www.ropox.dk

Ropox A/S,
 Ringstedgade 221, DK-4700 Næstved
 TLF: +45 5575 0500, E-mail: Info@ropox.dk

CE MD

Transport & storage



	Dette produktet er CE-merket i overensstemmelse med: Europeisk forordning om medisinsk utstyr (EU) 2017/745 Rådsdirektiv 2011/65/EU, RoHS
	Produsentens navn og adresse
	Produksjonsdato
	Varenummer
	Serienummer
	Les bruksanvisningen før bruk
	Se bruksanvisningen for viktig sikkerhetsrelatert informasjon, advarsler og sikkerhetsforanstaltninger.
	Skal ikke avhendes som usortert kommunalt avfall. Produktet skal returneres til en egnet gjenbruksstasjon
	Drifts- og oppbevaringstemperatur skal ikke overstige 5–40 C°
	Les bruksanvisningen før bruk

3. Generelle krav

3.1 Produktinformasjon

Produsent:	Ropox A/S Ringstedgade 221, DK-4700 Næstved +45 55 75 05 00 E-post: Info@ropox.com		
Varianter	Varenummer	Modell	UDI
	40-40450 40-40451	Hurtigutløser Krever verktøy	05707581014802 05707581014819
Forventet levetid	5 år		
MDR-klasse 2017/745	Klasse I		
Tiltenkt miljø	Dette produktet skal kun brukes i: Helsevesenet Private hjem		
Maks. brukervekt i henhold til DS/EN ISO 17966:2016	250 kg		
Høydejustering	200 mm		
Brukstemperatur	-5 °C til +40 °C Transport og oppbevaring +5 °C til +40 °C Bruk		
Materialer i kontakt med pasienten	<u>Komponenter</u> Spennegrep Frontplate Endestykker	<u>Materialbeskrivelse</u> Støpt sink med antimikrobiell maling Aluminium med antimikrobiell maling ABS med antimikrobielt tilsetningsstoff	

3.2 Produktbeskrivelse

Med den høydejusterbare enheten er det enkelt å justere høyden på Ropox toalettstøtter, noe som gir optimal komfort i brukssituasjonen.

3.3 Bruksformål


For brukere som trenger støtte til å sette seg og reise seg fra toalettet, er toalettstøtter en god og handikapvennlig hjelp. Personer med begrenset mobilitet kan bruke toalettstøttene som støtte når de skal fra stående til sittende stilling og omvendt. Den høydejusterbare enheten gjør det raskt og enkelt å tilpasse høyden på toalettstøtten til forskjellige brukere og forskjellige behov.

3.4 Egnet operatør


Den tilsiktede operatøren kan omfatte alle som har lest og forstått denne bruksanvisningen. Barn er imidlertid unntatt.

3.5 Produktets dimensjoner

40-40450 - Høydejusterbar enhet med hurtigutløser

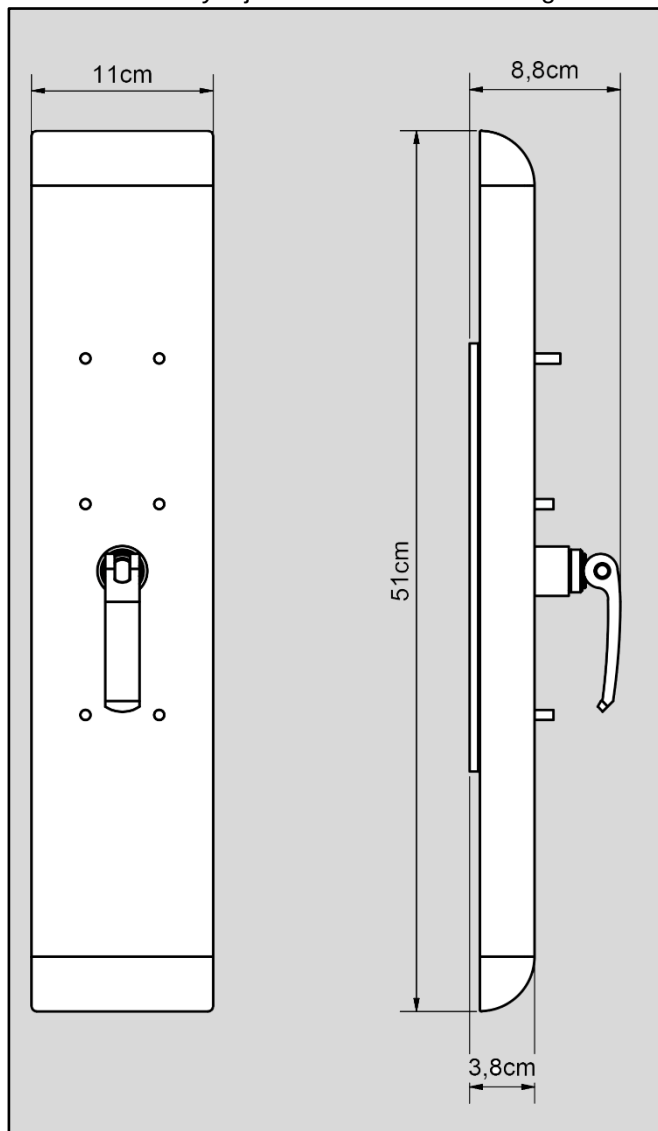

40-40451 – Høydejusterbar – krever verktøy

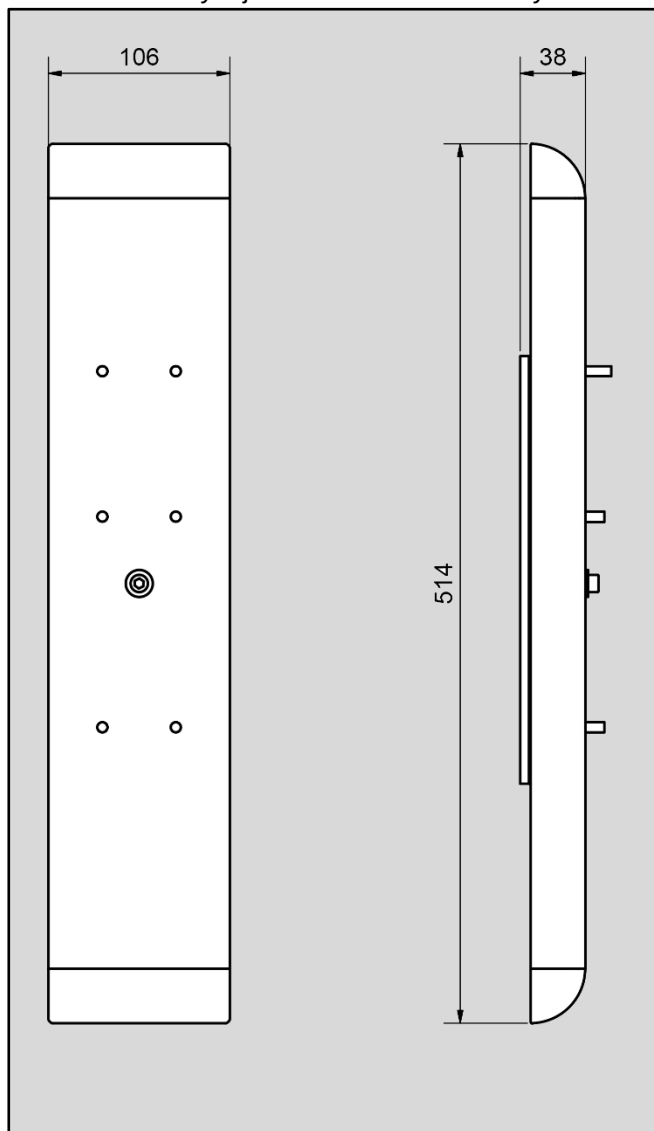

4. Instruksjoner for bruk

4.1 Monteringsgrensesnitt

Konstruksjon

Veggen skal være av skruefast materiale godkjent for våtrom.

Det skraverte området angir minimumsområde for forsterkning i vegg. Forsterkningen legges med fordel fra gulv til tak. Det er viktig at det er plass til at dekkappen kan bevege seg 100 mm, både opp og ned.

Den høydejusterbare enheten er belastningstestet i henhold til DS/ISO 17966, og den maksimale brukervekten er fastsatt til:

Maksimal brukervekt i henhold til DS/ISO 17966


250 kg

Maks trekk i de øverste skruene

125 kg

Plassering av de øverste hullene


Plasseringen avhenger av hvilken toalettstøtte som brukes. Alle mål er angitt i mm og ut fra en fast høyde til toppen av toalettstøtten på 800 mm +/- 100 mm over gulv. Hvis dette målet ønskes endret, skal de anbefalte målene endres tilsvarende.

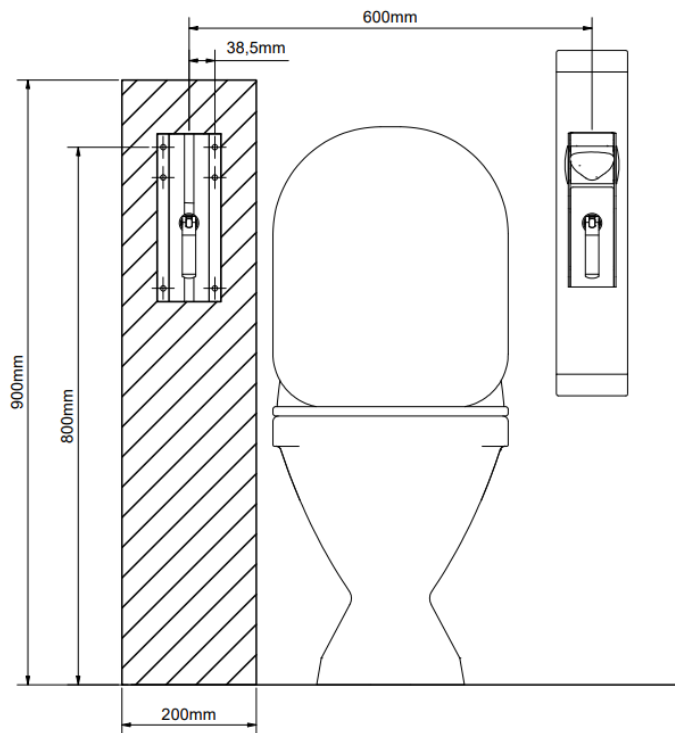

Enheten leveres med et sett (6 stk.) skruer og plugger som er beregnet for montering på betongvegg. Installatøren skal alltid vurdere veggens materiale, beskaffenhet og styrke og benytte egnede skruer og plugger til den aktuelle veggtypen.



4.2 Installasjon av produktet

1. Bor hull i henhold til ønsket høyde og bredde på toalettstøttene (se avsnittet om monteringsgrensesnitt)
2. Skru veggplaten fast til veggen, og sørg for at den er i lodd

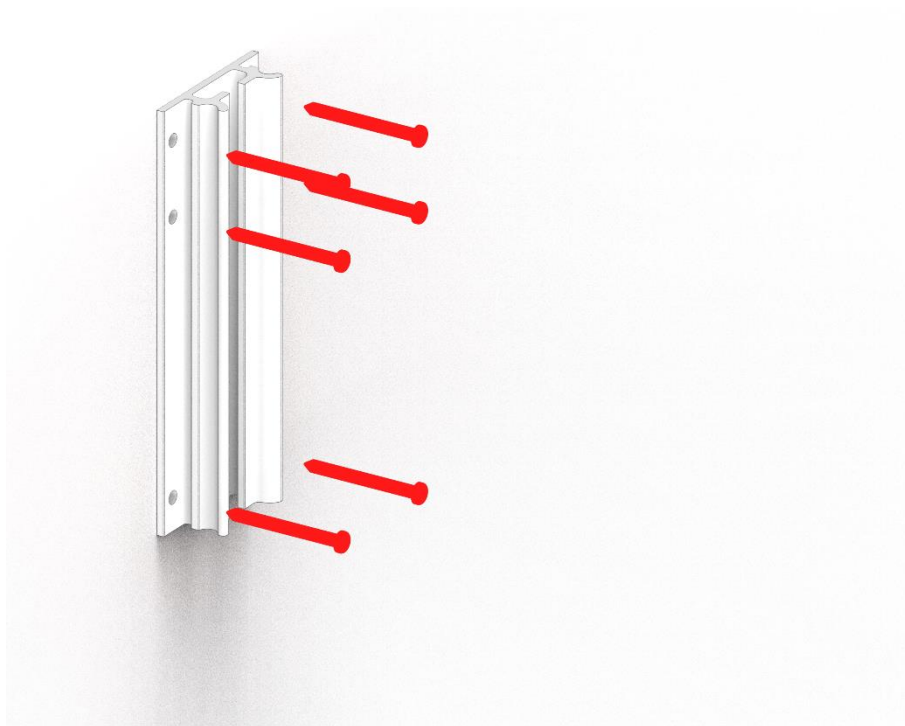

3. Monter frontplaten ovenfra i veggbeslaget.

Sørg for at spenngrepet er løsnet og at låsebrikken som er forbundet med dette, er orientert slik at det passer inn i slissen på veggbeslaget.

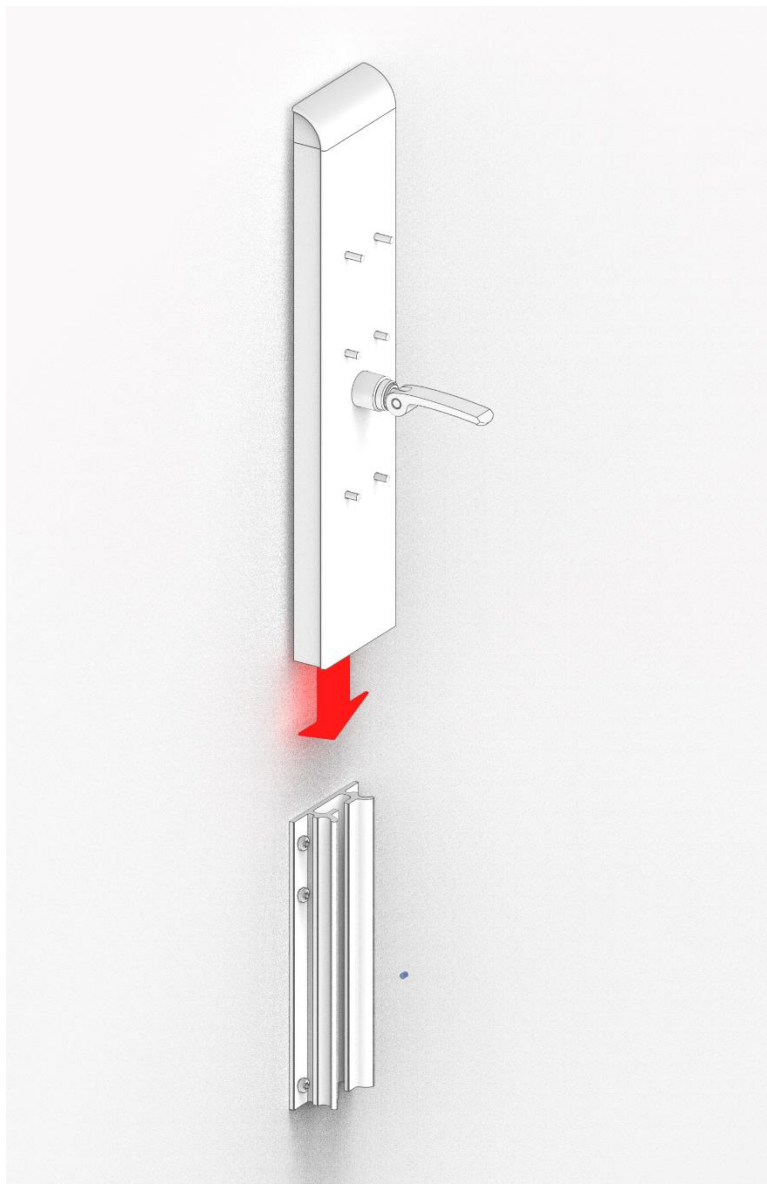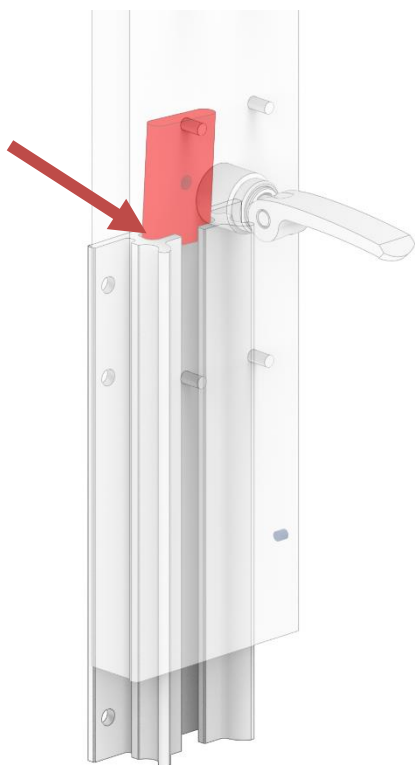

4. Monter låseplaten med de to skruene i bunnen av frontbeslaget
5. Klikk den nederste dekkplaten på



4.3 Montering av toalettstøtte


1. Finn de 6 medfølgende låsemutrene



2. Løsne spenngrepet slik at det peker utover, plasser toalettstøtten over gjengestagene og før spenngrepet gjennom hullet i toalettstøttens veggbeslag



3. Skru mutrene godt fast over gjengestagene. Vær spesielt påpasselig når de to øverste mutrene monteres, da hodet på skrumaskinen kan sette merker på trommelen til toalettstøtten

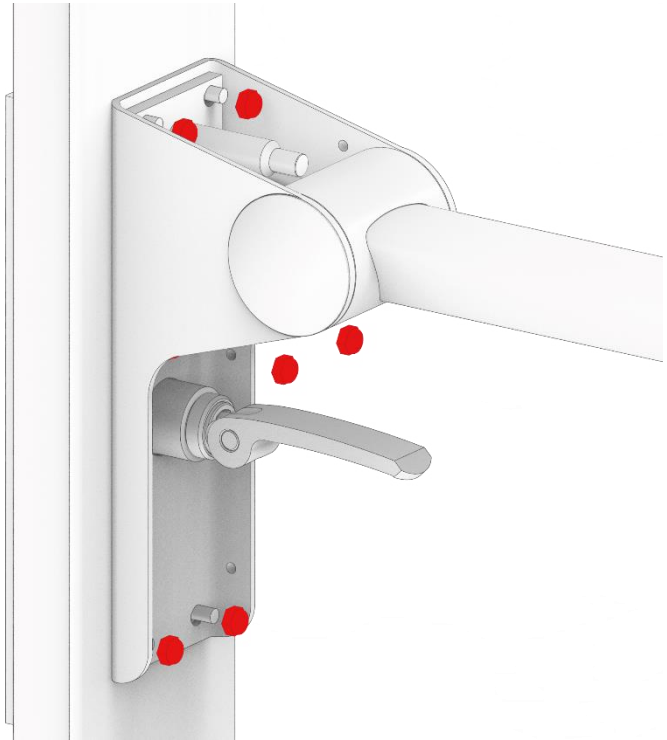


4. Før den medfølgende dekkplaten med utskjæring over spennegrepet og klikk den på plass
5. Monter den øvre dekkplaten
6. Test at produktet kan justeres fra topp til bunn uten å støte mot andre faste gjenstander i rommet



4.4 Betjening av produktet – hurtigutløser

Slik justeres høyden på den høydejusterbare enheten:

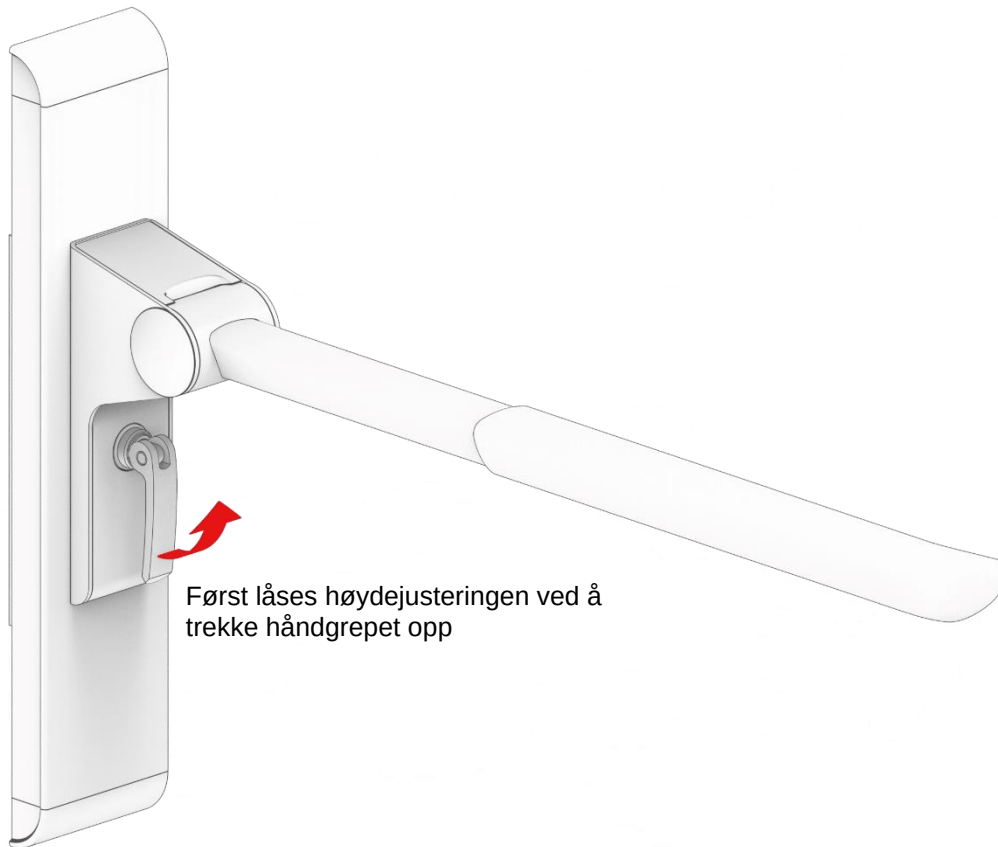


Først låses høydejusteringen ved å trekke håndgrepet opp

Nå kan toalettstøtten stilles inn trinnløst til ønsket høyde.

For å låse plasseringen igjen, trykkes håndgrepet ned slik at det peker nedover.

Høydejusteringen kan justeres trinnløst innenfor et intervall på 200 mm.

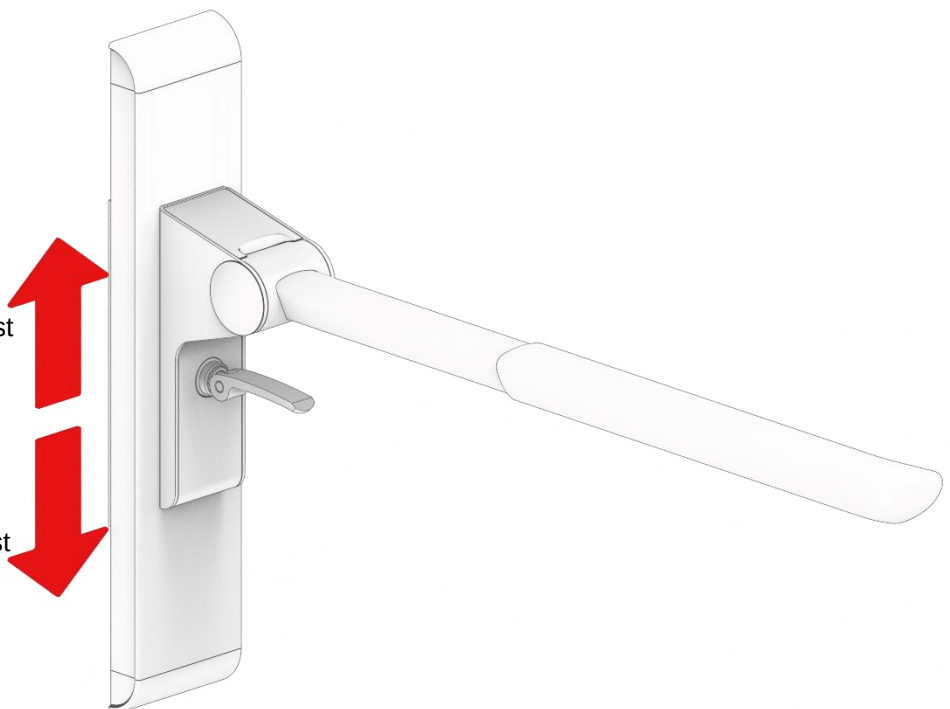

4.5 Betjening av produktet – uten hurtigutløser

Slik justeres høyden på den høydejusterbare enheten uten hurtigutløser:




Den nedre dekkplaten fjernes. Bruk en liten flat skrutrekker i slissen på undersiden



Løsne deretter skruen med en sekskantnøkkel ved å dreie én omdreining mot klokken

Høydejusteringen kan nå justeres fritt. Når ønsket høyde er oppnådd, strammes skruen igjen.

Kontroller alltid at høydejusteringen er sikker og forsvarlig festet før toalettstøtten tas i bruk.

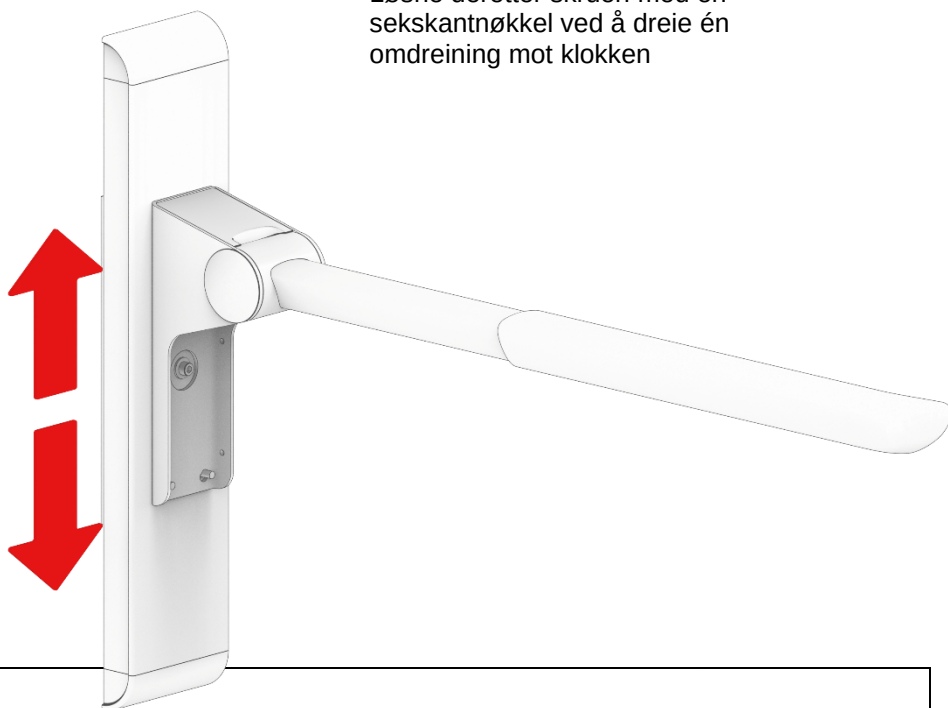

Advarsel!

Produktet skal alltid plasseres slik at det kan bevege seg fritt i hele anvendelsesområdet uten å kollidere med gjenstander. Avvik fra dette kan føre til at produktet blir ustabilt.

5. Rengjøring

Rengjøring kan utføres med lunkent vann og et egnet universalrengjøringsmiddel. Bruk en klut eller en myk svamp til å vaske produktet. Tørk av produktet med en oppvridd klut.

Til overflatedesinfeksjon kan klørbaserte desinfeksjonsmidler brukes så lenge produktspesifikasjonene og sikkerhetsforanstaltningene blir overholdt, men konsentrasjonen må ikke overstige 1 000 ppm aktivt klor. I tillegg kan etanolbaserte desinfeksjonsmidler godt brukes så lenge produktspesifikasjonene og sikkerhetsforanstaltningene blir overholdt.

Følgende midler har blitt testet av Ropox og kan brukes så lenge de er fortynnet i henhold til produktanvisningene.

5.1 Forhåndsgodkjente desinfeksjonsmidler

Handelsnavn	Oppløsning
Diversey Suma Tab D4	1 000 ppm
Rodalon ®	Etanol 70 % v/v

Umiddelbart etter endt rengjøring eller desinfeksjon skal produktet tørkes av først med en klut oppvridd i vann og deretter med et tørt oppvaskhåndkle. Hvis produktet ikke tørkes av, kan det bli misfarget eller få flekker, og overflatebehandlingen kan ta skade.

Vær oppmerksom på at det etter langvarig bruk av produktet, med normale rengjøringsintervaller, kan forventes at produktet vil miste noe glans eller farge. Produktet kan desinfiseres uavhengig av dette.



Obs!

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, f.eks. skurepulver, stålull, skuresvamp.

Dette produktet er ikke designet til å bli sterilisert, og autoklaving og sterilisering utover normal rengjøring kan endre produktets sikkerhet og funksjon.

6. Vedlikehold

Den høydejusterbare enheten er vedlikeholdsfri. Av sikkerhetsmessige hensyn anbefales det å undersøke alle bolteforbindelser og bevegelige deler jevnlig for å sikre at ingen deler er løse og at festene til veggen er intakte.



Obs!

Manglende overholdelse av regelmessig vedlikehold kan resultere i forringelse av produktets funksjon og sikkerhet.

7. Miljøhensyn

Produktet skal ikke avhendes som kommunalt avfall. Det skal utføres korrekt demontering, sortering og avhending av komponenter i avfallshåndteringen.



Komponent	Avhendingsanbefaling
Grep	Metall
Veggplate	Metall
Frontplate	Metall
Endestykker	Restavfall

8. Rapportering av ulykker/uhell

Produsenten av dette produktet anbefaler at enhver ulykke/hendelse i forbindelse med dette produktet som oppfyller samtlige av kriteriene nedenfor, skal rapporteres både til relevante myndigheter og til produsenten.

1. *Det har skjedd – eller det kunne ha skjedd – et uhell/en ulykke*
2. *Det medisinske utstyret anses som medvirkende årsak til hendelsen, og*
3. *Uhellet/ulykken resulterte i – eller kunne ha resultert i – en av følgende konsekvenser:*
 - *Dødsfall – en pasient, bruker eller tredjepart avgår ved døden*
 - *En alvorlig forverring av pasientens, brukerens eller tredjeparts helsetilstand, herunder i form av:*
 1. *Livstruende sykdom*
 2. *Varig skade eller mén*
 3. *Nødvendig medisinsk eller kirurgisk behandling for å avverge livstruende sykdom, varige skader eller mén*
 4. *Fosterdød, fosterskade eller medfødte misdannelser.*